

bebird® | Ear-care
You Can See



Please consult the instructions before using this product

Contents

1. English version instruction manual	EN-1 --- EN-5
App Download	EN-1
App Connection	EN-1
Device Overview	EN-2
Accessory Installation	EN-3
Bebird EarSight Plus Series Accessory List	EN-4
Troubleshooting	EN-5
Product Specifications	EN-5
WARNINGS	EN-5
2.Deutsche Version der Bedienungsanleitung	DE-6 --- DE-10
App-Download	DE-6
App Connection	DE-6
Geräteübersicht	DE-7
Accessory Installation	DE-8
Bebird EarSight Plus Serie Zubehörliste	DE-9
Fehlerbehebung	DE-10
Produktspezifikationen	DE-10
WARNHINWEISE	DE-10
3. Manuel d'instructions version française	FR-11 --- FR15
Téléchargement de l'app	FR-11
Connexion de l'app	FR-11
Aperçu de l'appareil	FR-12
Installation des accessoires	FR-13
Série Bebird EarSight Plus Liste des accessoires	FR-14
Dépannage	FR-15
Spécifications du produit	FR-15
AVERTISSEMENTS	FR-15
4. Manual de instrucciones versión en inglés	ES-16 --- ES-20
Descarga de App	ES-16
Conexión de la App	ES-16
Vista General del Dispositivo	ES-17
Instalación de Accesorios	ES-18
Serie Bebird EarSight PlusLista de accesorios	ES-19
Solución de problemas	ES-20
Especificaciones del producto	ES-20
Advertencias	ES-20
5.Manuale di istruzioni in versione inglese	IT-21 --- IT-25
App Scaricamento	IT-21
Connessione dell'App	IT-21
Panoramica del dispositivo	IT-22
Installazione degli Accessori	IT-23
Serie Bebird EarSight Plus Elenco Accessori	IT-24
Risoluzione dei Problemi	IT-25
Specifiche del Prodotto	IT-25
Avvertenze	IT-25

App Download



or



Search for “**bebird**”
in your phone's app store.

Scan the QR code to download
and install the **bebird** app.


App Connection

- 1 Press and hold the power button to turn on the device.




Once the device powers on,
a blue light will illuminate.


- 2 Open the Bebird App, and click “Connect the device”

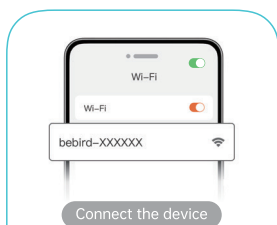

- 3 Connect Product Wi-Fi “bebird-xx-xxxxxx”

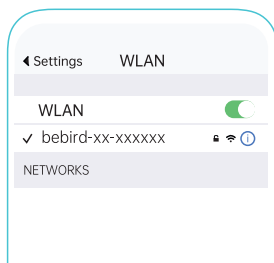

- 4 Return to the Bebird app and click “Begin to Clean Ears” to start using the device.

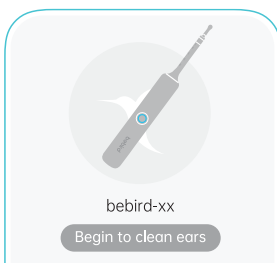

Device Overview

Silicone
Covered
Tips

Camera Lens

Hose


Attention:

Please note that our hose is designed with a specific bending direction.

When using, ensure the scale side is facing forward.

The hose should only be bent **left** and **right** to avoid damage or reduced functionality.

Do not bend in other directions, otherwise it may cause damage to the product.

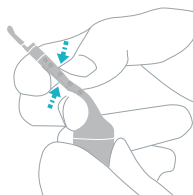

Do not use brute force. Before using the tweezers and ENT set, the bent lens needs to be straightened again.

Power Button

When the device is powered on, a blue light will illuminate.


☀ During power-on and connection, the blue indicator light will flash.

● Once connected, the blue light will remain lit.

● While charging, the indicator light will glow red.

○ When charging is complete, the red indicator will turn off.

☀ The blue indicator will flash rapidly when the battery is low.

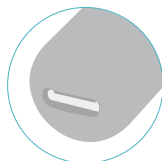

Charging Port

Accessory Installation

Protective Plug Installation:

Place the protective ear canal plug securely over the camera hose, ensuring it is positioned correctly.

This will prevent the device from penetrating too deeply into the ear canal.



Ear Spoon Installation:

To install the ear spoon, simply screw the metal-covered ear spoon tightly in place. This method applies to all types of ear spoons, including transparent two-color ear spoons, transparent ear spoons, ring-shaped rubberized ear spoons, and sponge ear spoons.




Tweezer Mounting:


Place the tweezers extension onto the body of the device. Tightly screw the head into place to secure.



Bebird EarSight Plus Series Accessory List

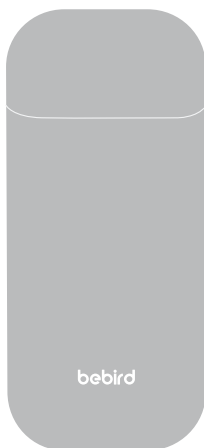

Accessory Case

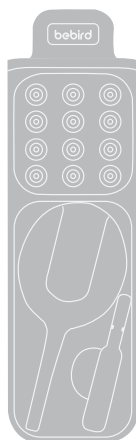

Accessory Tray



Nasal Speculum



Ear Canal Speculum



Tongue Depressor



Metal, Silicone Wrapped
Ear Spoon



Double-color Q-elastic
Ear Spoon



Double-color Annular
Ear Spoon



Sponge Ear Spoon



Plastic Ear Spoon



Tweezers
Component-B



Charging Cable



Ear canal
Protective Plug



Lens Brush



Tweezers
Component-A

Troubleshooting

Problem	Solution
No response after startup	• Use the enclosed charging cable to charge
The LED light of the camera is not on	• Interrupt the connection, restart the device to connect again
The app closes quickly	• Delete the existing app and reinstall
The indicator light blinks quickly	• Use the enclosed charging cable to charge
Abnormal display in app	• Interrupt the connection, restart the device to connect again
The wifi connection was unstable and disconnected after a few seconds	• Interrupt the connection, restart the device to connect again
Image is blurry	• Wipe the camera lens with a double-ended cleaning brush, cleaning cloth, or alcohol swab
Movement feels unnatural	• Switch the left/right ear mode in the app interface
If the issue persists after following the above operations, please contact our customer service, and we will provide you with further effective solutions.	

Product Specifications

Brand: bebird

Name: Bebird EarSight Plus

Usage time: Up to 80 minutes

Charge time: About 50 minutes

Intelligent orientation: Gimbaled Intelligent Gyroscope

Image sensor: CMOS

Input Current: 5V $\equiv$ 0.5A

Operating Frequency: 2.4GHz

Lens grade: 3P* Slim Lens, IP67 Waterproof,
Dustproof & Anti-Fog

Operating Environment: -10°C to 50°C


Image Frame Rate: 20fps

Network Standard: IEEE 802.11b/g

Optimum Focal Length: 12.5mm



WARNINGS

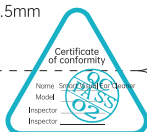

- **Cleaning:** Wipe the lens with a lens brush.
- **Assembly:** Ensure all device accessories are securely attached to prevent them from falling off during use.
- **Operating Environment:** Use the device in a suitable, private environment. Avoid using it in crowded spaces.
- **Battery Maintenance:** The device includes a built-in rechargeable battery. If unused for extended periods, charge it once a month to maintain battery health.
- **Supervision for Children:** Children should not use this device unsupervised to avoid accidental injury.
- **Sunlight Exposure:** Keep the main device and accessories out of direct sunlight to prevent softening or damage.
- **Water Exposure:** Do not submerge the device in any liquids.
- **Temperature Notice:** During use, the device may warm slightly due to the LED lights; this is normal and is capped at approximately 45°C (113°F).
- **Intended Use for Tweezers:** Use the tweezers only to remove earwax or other foreign objects from the ear canal.

App-Download



oder



Suchen Sie im App-Store Ihres Telefons nach „**bebird**“.

Scannen Sie den QR-Code, um die **bebird**-App herunterzuladen und zu installieren.

App Connection

- 1 Drücken und halten Sie den Ein-/Ausmacher, um das Gerät einzuschalten.



Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet ein blaues Licht auf.

- 2 Öffnen Sie die Bebird-App und klicken Sie auf „Gerät verbinden“.



- 3 Verbinden Sie sich mit dem Produkt-WLAN „bebird-xx-xxxxxx“.



- 4 Kehren Sie zur Bebird-App zurück und klicken Sie auf „Beginnen Sie mit der Ohrreinigung“, um das Gerät zu verwenden.



Geräteübersicht

Silikonbeschichtete
Spitzen

Kameraobjektiv

Schlauch

"Nichts für schwache nerven!"

Bitte achten sie auf uns

Der schlauch ist im eimer

In welche richtung?

Sicher zu Wissen,

wann es losgeht

Die daneben liegen nach vorn.

Der schlauch ist bestimmt nur

Links abbiegen,

rechts abbiegen

Verletzungen Oder abnahme.

Funktion.

Einschaltknopf

Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
leuchtet ein blaues Licht auf.

☀ Während des Einschaltens und
der Verbindung blinkt die blaue
Anzeige.

● Sobald die Verbindung hergestellt
ist, bleibt das blaue Licht an.

● Während des Ladens leuchtet
die Anzeige rot.


○ Wenn das Laden abgeschlossen
ist, erlischt die rote Anzeige.

☀ Die blaue Anzeige blinkt schnell,
wenn der Akku schwach ist.

Beugen sie sich
woanders nicht vor
Die straße runter.

Das ist nicht möglich

Ich habe bemerkt, dass dieses
produkt beschädigt wurde.

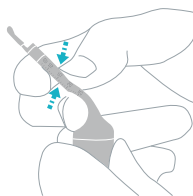

Keine gewalt!


Kurz bevor wir die

pinzette benutzen

Hier ist die hals-nasen-

ohren-technik

Das muß neu sortiert werden.

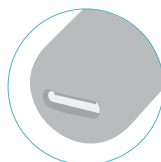

Ladeanschluss

Accessory Installation

Installation des Schutzstopfens:

Setzen Sie den Schutzstopfen für den Gehörgang sicher über den Kamera-Schlauch, sodass er korrekt positioniert ist.

Dies verhindert, dass das Gerät zu tief in den Gehörgang eindringt.




Installation des Ohr-Löffels:

Um den Ohr-Löffel zu installieren, schrauben Sie einfach den metallbeschichteten Ohr-Löffel fest an. Diese Methode gilt für alle Arten von Ohr-Löffeln, einschließlich transparenter zweifarbiger Ohr-Löffel, transparenter Ohr-Löffel, ringförmiger gummierte Ohr-Löffel und Schwamm-Ohr-Löffel.




Pinzettenmontage:


Setzen Sie die Pinzettenverlängerung auf das Gerät. Schrauben Sie den Kopf fest, um ihn zu sichern.

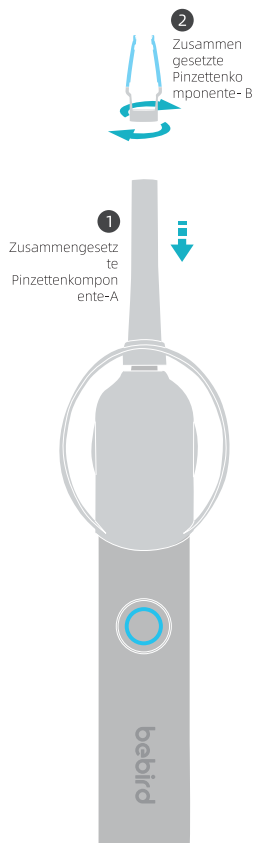

Bebird EarSight Plus Serie Zubehörliste

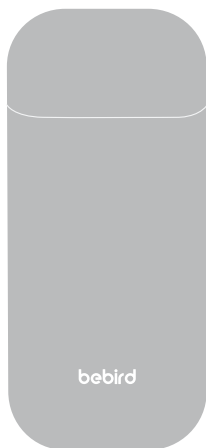

Zubehöretui

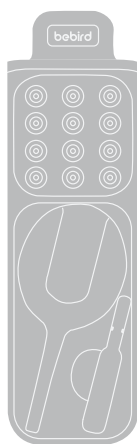

Zubehörtasche



Nasenspekulum



Ohrkanalspekulum



Zungenspatel



Metall, mit Silikon umwickelter
Ohr-Löffel



Zweifarbiger
Q-elastischer Ohr-Löffel



Zweifarbiger ringförmiger
Ohr-Löffel



Schwamm-Ohr-Löffel



Kunststoff-Ohr-Löffel



Pinzettenkomponente-B



Ladekabel



Schutzstopfen für den Gehörgang



Linsebürste



Pinzettenkomponente-A

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine Reaktion nach dem Start	• Verwenden Sie das beiliegende Ladekabel, um das Gerät aufzuladen
Die LED-Leuchte der Kamera leuchtet nicht	• Trennen Sie die Verbindung, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie die Verbindung erneut her
Die App schließt sich schnell	• Löschen Sie die bestehende App und installieren Sie sie erneut
Die Anzeige blinkt schnell	• Verwenden Sie das beiliegende Ladekabel, um das Gerät aufzuladen
Abnormale Anzeige in der App	• Trennen Sie die Verbindung, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie die Verbindung erneut her
Die WiFi-Verbindung ist instabil und wird nach einigen Sekunden unterbrochen	• Trennen Sie die Verbindung, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie die Verbindung erneut her
Das Bild ist unscharf	• Reinigen Sie die Kameralinse mit der doppelseitigen Reinigungsbürste, einem Reinigungstuch oder einem Alkoholtupfer
Die Bewegungen fühlen sich unnatürlich an	• Wechseln Sie den Modus für das linke/rechte Ohr in der App-Oberfläche
Wenn das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir werden Ihnen weitere effektive Lösungen anbieten.	

Produktspezifikationen

Marke: bebird

Name: Bebird EarSight Plus

Betriebszeit: bis zu 80 Minuten

Ladezeit: Etwa 50 Minuten

Intelligente Orientierung: Kardanischer intelligenter Gyroskop

Bildsensor: CMOS

Eingangsstrom: 5V 0,5A

Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Linienqualität: 3P* Slim-Linse, IP67 wasserdicht, staubdicht und anti-Beschlag

Betriebsumgebung: -10°C bis 50°C

Bildbildrate: 20fps

Netzwerkstandard: IEEE 802.11b/g

Optimale Brennweite: 12,5mm



WARNHINWEISE

Konformitätszertifikat



- **Reinigung:** Reinigen Sie die Linse mit einer Linsenbürste.
- **Montage:** Stellen Sie sicher, dass alle Zubehöerteile des Geräts sicher befestigt sind, um ein Herunterfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Betriebsumgebung:** Verwenden Sie das Gerät in einer geeigneten, privaten Umgebung. Vermeiden Sie die Nutzung an überfüllten Orten.
- **Batteriewartung:** Das Gerät verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Akku. Laden Sie ihn einmal im Monat auf, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, um die Batterielebensdauer zu erhalten.
- **Aufsicht bei Kindern:** Kinder sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Sonnenlichteinstrahlung:** Halten Sie das Hauptgerät und das Zubehör von direktem Sonnenlicht fern, um ein Erweichen oder Beschädigen zu verhindern.
- **Wasserkontakt:** Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
- **Temperaturhinweis:** Während der Nutzung kann sich das Gerät durch die LED-Lichter leicht erwärmen; dies ist normal und die Temperatur ist auf ca. 45°C (113°F) begrenzt.
- **Bestimmungsgemäße Verwendung der Pinzette:** Verwenden Sie die Pinzette nur, um Ohrenschmalz oder andere Fremdkörper aus dem Gehörgang zu entfernen.

Téléchargement de l'app



ou



Recherchez "**bebird**" dans le magasin d'applications de votre téléphone.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'app **bebird**.


Connexion de l'app

- 1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.




Une fois l'appareil allumé, une lumière bleue s'illuminera.

- 2 Ouvrez l'app bebird et cliquez sur "Connecter l'appareil."

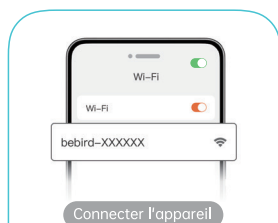

- 3 Connectez-vous au Wi-Fi du produit "bebird-xx-xxxxxx."

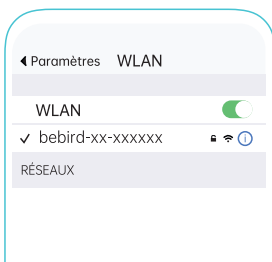

- 4 Retournez dans l'app Bebird et cliquez sur "Commencer à nettoyer les oreilles" pour commencer à utiliser l'appareil.



Aperçu de l'appareil


Silicone Recouvert
Embouts

Lentille de la caméra

Tuyau

Attention:
Veuillez noter que notre
Tuyau est conçu avec un
Direction de flexion spécifique.
En employant, assurez
Le côté de la balance
est tourné vers l'avant.
Le tuyau doit seulement être
Plié à gauche et à
droite pour éviter
Dommages ou réduit
Fonctionnalité.

Ne pliez pas dans l'autre
Directions, sinon il peut
Endommager le produit.

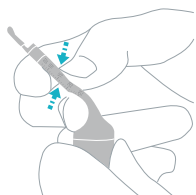


N'utilisez pas la force brute.
Avant d'utiliser les
pinces à épiler
Et ENT set, la lentille pliée
Doit être redressé à nouveau.

Bouton d'alimentation

Lorsque l'appareil est allumé,
une lumière bleue s'illuminera.

- ☀ Lors de l'allumage et de la connexion, le voyant bleu clignotera.
- Une fois connecté, la lumière bleue restera allumée.
- Pendant la charge, le voyant s'illuminera en rouge.
- Lorsque la charge est terminée, le voyant rouge s'éteindra.
- ☀ Le voyant bleu clignotera rapidement lorsque la batterie est faible.

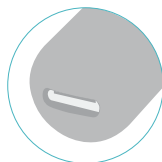

Port de chargement

Installation des accessoires

Installation du bouchon de protection :

Placez le bouchon de protection du canal auditif sur le tuyau de la caméra, en vous assurant qu'il est correctement positionné.

Cela empêchera l'appareil de pénétrer trop profondément dans le canal auditif.



Installation de la cuillère à oreilles :

Pour installer la cuillère à oreilles, vissez simplement la cuillère métallique recouverte de métal fermement en place. Cette méthode s'applique à tous les types de cuillères à oreilles, y compris les cuillères transparentes, les cuillères bicolores, les cuillères transparentes, les cuillères en forme d'anneau en caoutchouc et les cuillères en éponge.




Montage des pinces :

Placez l'extension des pinces sur le corps de l'appareil. Vissez fermement la tête en place pour la fixer.




Série Bebird EarSight Plus

Liste des accessoires

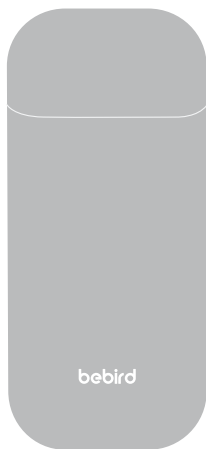

Boîtier des accessoires

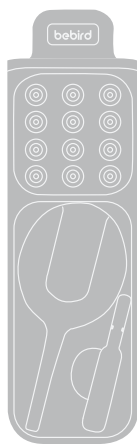

Plateau des accessoires



Speculum nasal



Speculum du canal auditif



Abaisseur de langue



Cuillère à oreilles en métal,
enveloppée de silicone



Cuillère à oreilles
Q-élastique bicolore



Cuillère à oreilles
annulaire bicolore



Cuillère à oreilles
en éponge



Cuillère à oreilles
en plastique



Composant des
pinces-B



Câble de chargement



Bouchon protecteur
du canal auditif



Brosse pour lentille



Composant des pinces-A

Dépannage

Problème	Solution
Aucune réponse après le démarrage	Utilisez le câble de chargement inclus pour recharger
Le voyant LED de la caméra ne s'allume pas	Interrompez la connexion, redémarrez l'appareil pour vous reconnecter
L'application se ferme rapidement	Supprimez l'application existante et réinstallez-la
Le voyant clignote rapidement	Utilisez le câble de chargement inclus pour recharger
Affichage anormal dans l'application	Interrompez la connexion, redémarrez l'appareil pour vous reconnecter
La connexion wifi était instable et s'est déconnectée après quelques secondes	Interrompez la connexion, redémarrez l'appareil pour vous reconnecter
L'image est floue	Essayez la lentille de la caméra avec une brosse de nettoyage à double extrémité, un chiffon de nettoyage ou un tampon alcoolisé
Le mouvement semble artificiel	Changez le mode gauche/droit dans l'interface de l'application
Si le problème persiste après avoir suivi les opérations ci-dessus, veuillez contacter notre service client et nous vous fournirons des solutions efficaces supplémentaires.	

Spécifications du produit

Marque : bebird

Nom : Bebird EarSight Plus

Temps d'utilisation : Jusqu'à 80 minutes

Temps de charge : Environ 50 minutes

Orientation intelligente : Gyroscopie intelligent stabilisé

Capteur d'image : CMOS

Courant d'entrée : 5V 0,5A

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz

Qualité de la lentille : Lentille mince 3P*,
étanchéité IP67,
antibuée et anti-poussière

Environnement de fonctionnement : -10°C à 50°C

Taux de trame d'image : 20 fps

Norme réseau : IEEE 802.11b/g

Longueur focale optimale : 12,5 mm



AVERTISSEMENTS



- **Nettoyage** : Essayez la lentille avec une brosse pour lentille.
- **Assemblage** : Assurez-vous que tous les accessoires de l'appareil sont correctement fixés pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- **Environnement de fonctionnement** : Utilisez l'appareil dans un environnement approprié et privé. Évitez de l'utiliser dans des espaces bondés.
- **Entretien de la batterie** : L'appareil dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Si non utilisé pendant une longue période, chargez-le une fois par mois pour maintenir la santé de la batterie.
- **Supervision des enfants** : Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance pour éviter tout risque de blessure accidentelle.
- **Exposition au soleil** : Gardez l'appareil principal et les accessoires à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter tout ramollissement ou dommage.
- **Exposition à l'eau** : Ne plongez pas l'appareil dans des liquides.
- **Avertissement de température** : Pendant l'utilisation, l'appareil peut chauffer légèrement en raison des lumières LED ; cela est normal et limité à environ 45°C (113°F).
- **Utilisation prévue pour les pinces** : Utilisez les pinces uniquement pour retirer le cérumen ou d'autres objets étrangers du canal auditif.

Descarga de App



o



Busca "bebird" en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.

Escanea el código QR para descargar e instalar la aplicación **bebird**

Conexión de la App

- 1 Presiona y mantén presionado el botón de encendido para activar el dispositivo.



Una vez que el dispositivo se activa, se iluminará una luz azul.

- 2 Abre la App Bebird y haz clic en "Conectar el dispositivo".



- 3 Conectar al Wi-Fi del producto "bebird-xx-xxxxxx"



- 4 Regresa a la app Bebird y haz clic en "Comenzar a limpiar los oídos" para comenzar a usar el dispositivo.



Vista General del Dispositivo

Puntas Cubiertas
de Silicona


Manguera

Atención:
Por favor tenga en
cuenta que nuestro
La manguera está
diseñada con un
Dirección específica de flexión.

Al usar, asegúrese de que
El lado de la escala está
mirando hacia adelante.

La manguera debe
ser solamente
Doble a la izquierda y
derecha para evitar
Daños o reducción
Funcionalidad.

No se incline en otro
Instrucciones,
de lo contrario puede
Causar daños al producto.

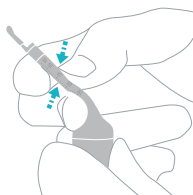


No utilice fuerza bruta.
Antes de usar las pinzas
Y ENT conjunto,
la lente doblada
Necesita ser enderredado nuevo.

Lente de la Cámara

Botón de Encendido

Cuando el dispositivo está
encendido, se iluminará una luz azul.

-  Durante el encendido y la
conexión, el indicador azul
parpadeará.
-  Una vez conectado, la luz azul
permanecerá encendida.
-  Durante la carga, la luz
indicadora se volverá roja.
-  Cuando la carga esté completa,
el indicador rojo se apagará.
-  El indicador azul parpadeará
rápidamente cuando la batería
esté baja.

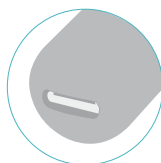

Puerto de Carga

Instalación de Accesorios

Instalación del Tapón Protector:

Coloca el tapón protector del canal auditivo de manera segura sobre la manguera de la cámara, asegurando que esté posicionado correctamente.

Esto evitará que el dispositivo penetre demasiado profundamente en el canal auditivo.



Instalación de la Cuchara para Oídos:

Para instalar la cuchara para oídos, simplemente atornilla la cuchara para oídos cubierta de metal firmemente en su lugar. Este método se aplica a todos los tipos de cucharas para oídos, incluyendo: cucharas para oídos transparentes de dos colores, cucharas para oídos transparentes, cucharas para oídos de goma en forma de anillo y cucharas para oídos de esponja.




Montaje de Pinzas:


Coloca la extensión de las pinzas en el cuerpo del dispositivo. Atornilla firmemente la cabeza en su lugar para asegurar.



Serie Bebird EarSight PlusLista de accesorios

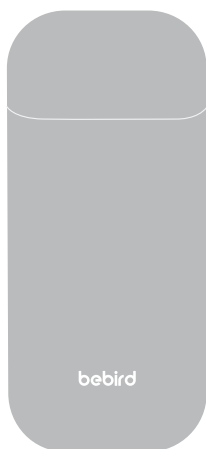

Estuche para accesorios

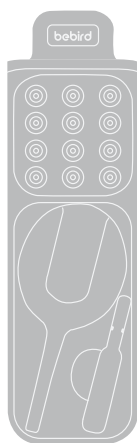

Bandeja para accesorios



Espéculo nasal



Espéculo para
canal auditivo



Depresor lingual



Cucharilla para oídos envuelta
en silicona metálica



Cucharilla elástica para
oídos de dos colores



Cucharilla anular para
oídos de dos colores



Cucharilla para oídos
de esponja



Cucharilla para oídos
de plástico



Componente-B
de pinzas



Cable de carga



Tapón protector para
el canal auditivo



Cepillo para lentes



Componente-A de pinzas

Solución de problemas

Problema	Solución
No hay respuesta después del inicio	● Utiliza el cable de carga incluido para cargar
La luz LED de la cámara no está encendida	● Interrumpe la conexión, reinicia el dispositivo para reconectar
La aplicación se cierra rápidamente	● Elimina la aplicación existente y reinstálala
La luz indicadora parpadea rápidamente	● Utiliza el cable de carga incluido para cargar
Visualización anormal en la aplicación	● Interrumpe la conexión, reinicia el dispositivo para reconectar
La conexión wifi fue inestable y se desconectó después de unos segundos	● Interrumpe la conexión, reinicia el dispositivo para reconectar
La imagen está borrosa	● Limpia la lente de la cámara con un cepillo de doble punta, un paño de limpieza o un hisopo con alcohol
El movimiento se siente antinatural	● Cambia el modo de oído izquierdo/derecho en la interfaz de la aplicación
Si el problema persiste después de seguir las operaciones anteriores, por favor contacte a nuestro servicio al cliente, y le proporcionaremos soluciones más efectivas.	

Especificaciones del producto

Marca: bebird

Nombre: Bebird EarSight Plus

Tiempo de uso: Hasta 80 minutos

Tiempo de carga: Alrededor de 50 minutos

Gyroscope Orientación inteligente:

Giroscopio Inteligente con Córdón

Sensor de imagen: CMOS

Corriente de entrada: 5V-0.5A

Frecuencia de operación: 2.4GHz

Grado de la lente: Lente Delgada 3P*, IP67 Impermeable, a prueba de polvo y antiempañamiento.

Entorno operativo: -10°C a 50°C

Tasa de cuadros de imagen: 20fps

Estándar de red: IEEE 802.11b/g

Longitud focal óptima: 12.5mm



Advertencias

- **Limpieza:** Limpiar la lente con un cepillo para lentes.
- **Montaje:** Asegúrese de que todos los accesorios del dispositivo estén bien sujetos para evitar que se caigan durante el uso.
- **Entorno operativo:** Utilice el dispositivo en un entorno adecuado y privado. Evite usarlo en lugares concurridos.
- **Mantenimiento de la batería:** El dispositivo incluye una batería recargable integrada. Si no se usa durante períodos prolongados, cárguelo una vez al mes para mantener la salud de la batería.
- **Supervisión para niños:** Los niños no deben usar este dispositivo sin supervisión para evitar lesiones accidentales.
- **Exposición al sol:** Mantenga el dispositivo principal y los accesorios fuera de la luz solar directa para evitar que se ablanden o dañen.
- **Exposición al agua:** No sumerja el dispositivo en ningún líquido.
- **Aviso de temperatura:** Durante el uso, el dispositivo puede calentarse ligeramente debido a las luces LED; esto es normal y está limitado a aproximadamente 45°C (113°F).
- **Uso previsto para las pinzas:** Utilice las pinzas solo para remover cera de oídos u otros objetos extraños del canal auditivo.



App Scaricamento



or



Cerca "bebird" nell'app store del tuo telefono.

Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app **Bebird**.

Connessione dell'App

- 1 Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.



Quando il dispositivo si accende, si illuminerà una luce blu.

- 2 Apri l'app Bebird e clicca su "Collega il dispositivo".



- 3 Connetti il Wi-Fi del prodotto denominato "bebird-xx-xxxxxx".



- 4 Torna all'app Bebird e clicca su "Inizia a pulire le orecchie" per iniziare a utilizzare il dispositivo.



Panoramica del dispositivo


Puntali ricoperti in
silicone

Obiettivo della

Tubo flessibile

Attenzione:
Si noti che il nostro
Il tubo flessibile è
progettato con a
Direzione di flessione specifica.
Durante l'uso, assicurarsi l'
Il lato della scala è
rivolto in avanti.
Il tubo dovrebbe essere solo
Piegato a destra e a
sinistra per evitare
Danno o riduzione
Funzionalità.

Non piegarsi in un altro
Direzioni, altrimenti potrebbe
Causare danni al prodotto.

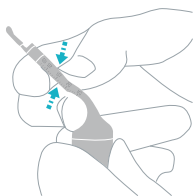

Non usare forza bruta.
Prima di usare le pinzette
E insieme ENT, la lente curvata
Deve essere
nuovamente raddrizzato.

Pulsante di accensione

Quando il dispositivo è acceso,
si accenderà una luce blu.


☀ Durante l'accensione e la
connessione, l'indicatore blu
lampeggerà.

● Una volta connesso, la luce blu
rimarrà accesa.

● Durante la ricarica, l'indicatore
si illuminerà di rosso.

○ Quando la ricarica è completata,
l'indicatore rosso si spegnerà.

☀ L'indicatore blu lampeggerà
rapidamente quando la batteria
è scarica.

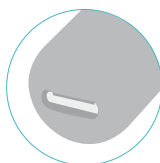

Porta di ricarica

Installazione degli Accessori

Installazione del Tappo Protettivo:

Posizionare il tappo protettivo del condotto uditivo saldamente sopra il tubo della fotocamera, assicurandosi che sia posizionato correttamente.

Questo previene che il dispositivo penetri troppo in profondità nel condotto uditivo.



Installazione del Cucchiaino Auricolare:

Per installare il cucchiaino auricolare, avvitare saldamente il cucchiaino rivestito in metallo. Questo metodo si applica a tutti i tipi di cucchiaini auricolari, inclusi quelli trasparenti bicolori, trasparenti, a forma di anello in gomma e in spugna.




Montaggio della Pinzetta:

Posizionare l'estensione delle pinzette sul corpo del dispositivo. Avvitare saldamente la testa per fissarla.




Serie Bebird EarSight Plus

Elenco Accessori

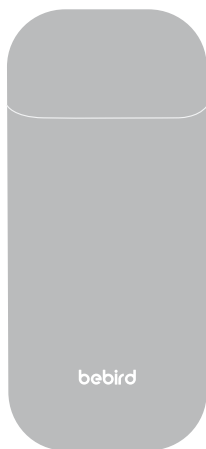

Custodia Accessori

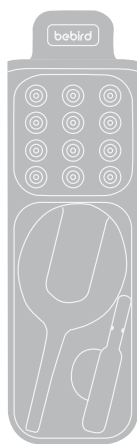

Vassoio Accessori



Speculum Nasale



Speculum del
Condotto Uditivo



Depressore Linguale



Cucchiaino Auricolare in Metallo
con Rivestimento in Silicone



Cucchiaino Auricolare
Bicolore Q-elastico



Cucchiaino Auricolare
Bicolore ad Anello



Cucchiaino Auricolare
in Spugna



Cucchiaino Auricolare
in Plastica



Pinzetta -
Componente B



Cavo di Ricarica



Tappo Protettivo del
Condotto Uditivo



Pennello per Lenti



Pinzetta - Componente A

Risoluzione dei Problemi

Problema	Soluzione
Nessuna risposta dopo l'avvio	Utilizzare il cavo di ricarica incluso per ricaricare
La luce LED della fotocamera non è accesa	Interrompere la connessione, riavviare il dispositivo e riconnetterlo
L'app si chiude rapidamente	Eliminare l'app esistente e reinstallarla
La spia lampeggia rapidamente	Utilizzare il cavo di ricarica incluso per ricaricare
Visualizzazione anomala nell'app	Interrompere la connessione, riavviare il dispositivo e riconnetterlo
La connessione Wi-Fi era instabile e si è disconnessa dopo alcuni secondi	Interrompere la connessione, riavviare il dispositivo e riconnetterlo
L'immagine è sfocata	Cambiare la modalità orecchio sinistro/destro nell'interfaccia dell'app
Il movimento sembra innaturale	Cambia il modo di oído izquierdo/derecho en la interfaz de la aplicación
Se il problema persiste dopo aver seguito le operazioni sopra indicate, contattare il nostro servizio clienti, e forniremo ulteriori soluzioni efficaci.	

Specifiche del Prodotto

Marca: bebird

Nome: Bebird EarSight Plus

Tempo di utilizzo: fino a 80 minuti

Tempo di ricarica: Circa 50 minuti

Orientamento intelligente: Giroscopio
Intelligente Cardanico

Sensore immagine: CMOS

Corrente in ingresso: 5V 0.5A

Frequenza operativa: 2.4GHz

Grado lente: Lente Slim 3P*, Impermeabile IP67,
Antipolvere e Antiappannamento

Ambiente operativo: -10°C a 50°C

Frequenza dei fotogrammi: 20fps

Standard di rete: IEEE 802.11b/g

Lunghezza focale ottimale: 12,5mm



Avvertenze



- **Pulizia:** Pulire la lente con un pennello per lenti.
- **Montaggio:** Assicurarsi che tutti gli accessori del dispositivo siano saldamente fissati per evitare che si staccino durante l'uso.
- **Ambiente operativo:** Utilizzare il dispositivo in un ambiente adatto e privato.
Evitare di usarlo in luoghi affollati.
- **Manutenzione della batteria:** Il dispositivo include una batteria ricaricabile integrata. Se non utilizzato per lunghi periodi, ricaricarlo una volta al mese per mantenere la salute della batteria.
- **Supervisione per bambini:** I bambini non devono utilizzare questo dispositivo senza supervisione per evitare lesioni accidentali.
- **Esposizione al sole:** Tenere il dispositivo principale e gli accessori lontano dalla luce diretta del sole per evitare ammorbimenti o danni.
- **Esposizione all'acqua:** Non immergere il dispositivo in liquidi.
- **Avviso di temperatura:** Durante l'uso, il dispositivo può riscaldarsi leggermente a causa delle luci LED; ciò è normale e limitato a circa 45°C (113°F).
- **Uso previsto per le pinzette:** Utilizzare le pinzette solo per rimuovere cerume o altri oggetti estranei dal condotto uditivo.